

Kopfmassagegerät iDream3

Artikel-Nummer: 214-323

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für iDream3 entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.



Einführung, Anwendungsbereich und Anwendungsgruppen

Einführung

Dank seines ergonomischen Designs und verstellbarer Drehknöpfe ist IDream3 für die Anwendung am Kopf bei unterschiedlichen Kopfumfängen geeignet. Mit dem Gerät werden spezielle Akupunkturpunkte am Kopf und an der Augenpartie durch knetende, vibrierende und wärmezuführende Massagefunktionen sanft massiert. So kann die Sauerstoffzufuhr in das Gehirn und die Augenregion angeregt und der Blutkreislauf im Gehirn und den Augen verbessert werden. Die sanfte Massage reduziert die Anspannung und auftretende Müdigkeitserscheinungen des Gehirns und der Augen und sorgt für einen gesunden Schlaf und Wohlbefinden. Sie können während der Massage mit diesem Produkt auch Musik hören und so Gehirn und Seele entspannen.

Anwendungsbereich

Die sanft knetende und vibrierende Massage der spezifischen Akupunkturpunkte am Kopf und an der Augenpartie lösen Anspannung und Stress und helfen bei Müdigkeitserscheinungen; die Channel-Massage verbessert den Schlaf, so dass Sie sich frisch und ausgeglichen fühlen und völlig entspannen können.

Packungsinhalt

Zu Ihrer Massage-Station gehören das Massagegerät, eine Fernbedienung, ein Adapter, eine Bedienungsanleitung, Kopfhörer und Batterien.

Massagestation



Massagegerät



Fernbedienung

Basiskomponenten



Adapter



Kopfhörer




Bedienungsanleitung



Batterien (3xAAA)

Funktionen

Massagegerät und Fernbedienung

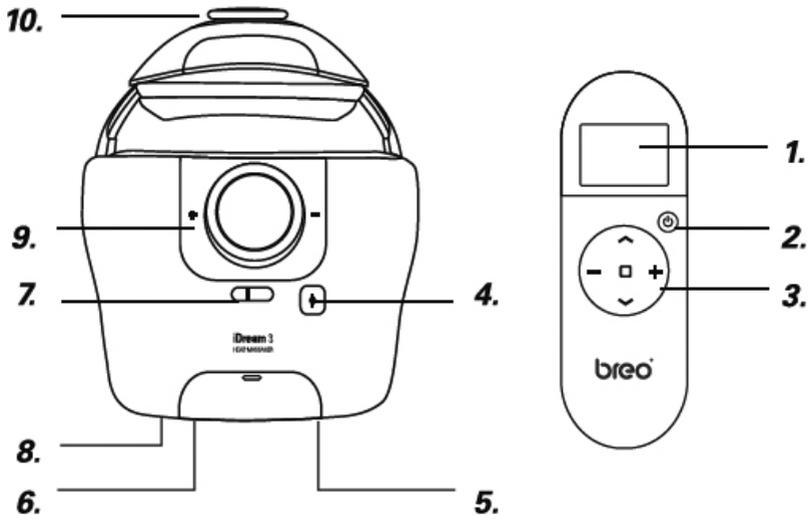

1. LCD-Display
2. Ein-/Aus-Taste
3. Funktionstasten
4. Luftentladetaste
5. Schnittstelle für Stromversorgung
6. Kopfhörerbuchse
7. Netzschalter
8. Kodierungstaste
9. Knopf für die Regulierung der Größe (Kopfumfang)
10. Knopf für die Regulierung des Sitzes (perfekte Anpassung an die Kopfform)

- 3. Funktionstasten:**
Richtungstasten \wedge/\vee
Verstärkung/Reduktion $+/-$
Funktionswahltaste \square

LCD-Display

Von oben nach unten: Zeit/Luftdruck/Vibration/Wärme/Musik

Funktionstasten:

Im Uhrzeigersinn: Rauf-Taste/Mode+/Runter-Taste/Mode-, OK-Taste in der Mitte
Power-Taste:

Nach dem Gebrauch muss zum Ausschalten des Gerätes die Power-Taste auf die Position OFF (Aus) geschoben werden.

Funktionen

Achtung:

Wenn bei der Herstellung eines Signals zwischen dem Massagegerät und der Fernbedienung Probleme auftreten, können Sie eine Abstimmung der Kodierung von Gerät und Fernbedienung durchführen:

1. Schalten Sie das Hauptgerät und die Fernbedienung aus, drücken Sie die [8] Kodierungstaste am Massagegerät und halten Sie diese gedrückt. Dann schalten Sie das Massagegerät wieder ein, sodass das blaue LED-Lämpchen auf der Vorderseite des Hauptgeräts blinkt.
2. Lassen Sie die Encoding Operation-Taste [8] des Massagegeräts los und halten Sie gleichzeitig die □ Taste der Fernbedienung und die ⊕ -Taste für 2-3 Sekunden gedrückt. Das LCD-Display der Fernbedienung leuchtet auf. Das blaue LED-Lämpchen am Massagegerät geht dann aus, was bedeutet, dass die Vorbereitung der Code-Verifizierung erfolgreich war. (Dieser Schritt muss innerhalb von 6 Sekunden durchgeführt werden)
3. Schalten Sie das Hauptgerät aus. Bei der nächsten Inbetriebnahme des Produktes funktioniert die Fernbedienung.

Bitte stellen Sie sicher, dass ein Hauptgerät jeweils von nur einer Fernbedienung gesteuert wird. Der Einsatz von mehreren Fernbedienungen für ein Hauptgerät ist untersagt.

Vor dem Gebrauch

1. Bitte überprüfen Sie, ob das Gerät und die Zubehörteile vollständig geliefert wurden.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Stromversorgung vorhanden ist.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass der Adapter unbeschädigt ist.


Bedienung

Aufladen des Massagegeräts

1. Öffnen Sie die Schnittstelle für die Stromversorgung [5] und stecken Sie den Adapter ein.
2. Während der Ladezeit leuchtet das Lämpchen auf der Vorderseite des Massagegeräts rot und blinkt. Sobald es vollständig geladen ist, leuchtet es blau.

Achtung:

1. Schalten Sie das Gerät ab, während Sie es aufladen. Die Ladezeit beträgt etwa 3-4 Stunden.
2. Das Hauptgerät kann während der Ladezeit nicht in Betrieb genommen werden.
3. Wenn die Batterieleistung unter 3.2 ± 0.1 V fällt, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Wenn das LED-Lämpchen des Hauptgerätes blinkt und alle Funktionen stoppen, laden Sie das Hauptgerät bitte wieder auf.

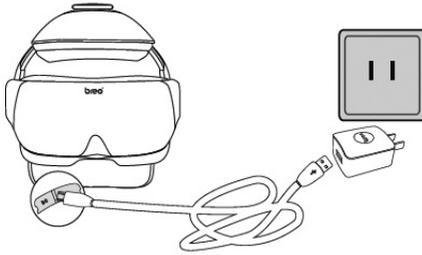

Power on (Einschalten)

1. Entfernen Sie die Plastikabdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung, legen Sie 3 AAA-Batterien korrekt ein und setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Batteriefach; (Abb. 1)
2. Das Hauptgerät bezieht seine Leistung aus einem leistungsstarken und umweltfreundlichen Lithium-Ionen-Akku.

Aufsetzen des Massagegerätes

1. Passen Sie zum Aufsetzen des Massagegerätes die Oberseite und die beiden Außenseiten entsprechend Ihrer Kopfform an.
2. Achten Sie dabei auf einen ausreichenden Abstand des Kopfteils zum Kopf.

Bedienung

Power On/Off (An/Aus)


Power on (Einschalten) -

- Schieben Sie die Power-Taste des Massagegeräts auf die Position „ON“ (Ein).
- Drücken und halten Sie die Ⓞ -Taste gedrückt
- Stellen Sie den Luftdruck + Wärme-Komprese für eine 15-minütige Massage ein. (Standardeinstellung Luftdruck: Zirkulation; Standardeinstellung Wärme-Komprese: Hohe Temperatur; Musik: Klaviermusik)


Power off (Ausschalten)-

- Kurz auf die Ⓞ -Taste drücken
- Schieben Sie die Power-Taste [7] auf dem Massagegerät auf die Position „OFF“ (Aus) (Abb. 2)

Sie können die Einstellungen für Dauer, Luftdruck, Musik, Wärme-Komprese und Vibrationen auch manuell über die entsprechenden Funktionstasten verändern.

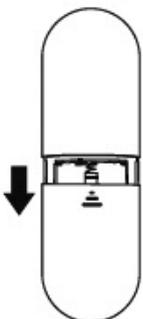

(Bild 1)

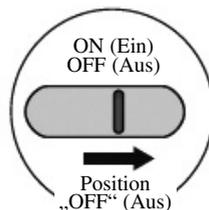

(Bild 2)

Manuelle Bedienung

Drücken Sie kurz die \wedge/\vee -Taste und wählen Sie die gewünschte Funktion

- Drücken Sie kurz die \square Taste
- Drücken Sie zur Auswahl kurz die $+/ -$ -Taste

Zeit

- Drücken Sie kurz die \wedge/\vee -Taste, um die Funktion „Zeit“ auszuwählen. Drücken Sie dann kurz die \square Taste
- Drücken Sie kurz die $+/ -$ -Taste, um zwischen einer Dauer von 15 Minuten/10 Minuten/5 Minuten zu wählen.

Luftdruck

- Drücken Sie kurz die \wedge/\vee -Taste, um die Funktion „Luftdruck“ auszuwählen. Drücken Sie dann kurz die \square Taste
- Drücken Sie kurz die $+/ -$ -Taste, um aus fünf möglichen Varianten des Luftdrucks zu wählen (Die Voreinstellung ist Zirkulation)
- Off/On (Aus/Ein), Drücken Sie kurz die \square Taste

Wärmefunktion

- Drücken Sie kurz die \wedge/\vee -Taste, um die Funktion „Wärmekomresse“ auszuwählen. Drücken Sie dann kurz die \square Taste
- Drücken Sie zur Auswahl kurz die $+/ -$ -Taste: Geringe Temperatur/ hohe Temperatur
- Off/On (Aus/Ein), Drücken Sie kurz die \square Taste

Vibration

- Drücken Sie kurz die \wedge/\vee -Taste, um die Funktion „Vibration“ auszuwählen. Drücken Sie dann kurz die \square Taste
- Drücken Sie zur Auswahl kurz die $+/ -$ -Taste: Mode 1/Mode 2/ Mode 3/Mode 4/Mode 5
- Off/On (Aus/An), Drücken Sie kurz die \square Taste

Achtung: Falls der Luftdruck zu hoch ist, drücken Sie bitte leicht auf die Luftentladetaste [4], um Luft ausströmen zu lassen.

Musik

- Drücken Sie kurz die / -Taste, um die Funktion „Musik“ auszuwählen. Drücken Sie dann kurz die  Taste
- Drücken Sie kurz die  -Taste, um zum nächsten Titel zu gelangen (Die Voreinstellung ist alle Titel abspielen und wiederholen)
- Drücken Sie kurz die  -Taste, um den vorangegangenen Titel zu wiederholen

Achtung: Abfolge der gespeicherten Titel: Klaviermusik (1)/Brainwave Musik (2)/Naturtöne (5)

Vorsichtsmaßnahmen

1. Der Gebrauch des Massagegerätes während des Autofahrens ist verboten.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät nicht bei extrem hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit nutzen.
3. Entfernen Sie vor dem Gebrauch sämtliche Haarspangen, Haarschmuck sowie Kontaktlinsen.
4. Schalten Sie das Gerät erst ein, nachdem Sie es aufgesetzt haben, um eine Beschädigung des Luftkissens durch übermäßigen Druck zu vermeiden
5. Dieses Massagegerät ist passend für Erwachsene mit einem Kopfumfang von 56–64 cm.
6. Das Gerät darf nicht von Personen benutzt werden, die Entzündungen oder Blutstasen sowie Operationswunden am Kopf aufweisen.
7. Auch Personen, die einen Schlaganfall hatten, an Hypertonie oder Hypotonie leiden, sollten auf den Gebrauch dieses Gerätes verzichten.
8. Personen, die körperlich, mental oder intellektuell eingeschränkt sind, sollten dieses Produktes nur unter Aufsicht benutzen.
9. Bitte nutzen Sie ausschließlich den von uns gelieferten DC 5V Adapter und achten Sie auf eine ordnungsgemäße Benutzung.
10. Wenn die Batterien schwach sind oder das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien bitte aus der Fernbedienung, um eine Beschädigung durch auslaufende Batterien zu vermeiden.
11. Nach dem Gebrauch muss zum Ausschalten des Gerätes die Power-Taste unbedingt auf die Stellung „OFF“ (Aus) geschoben werden.
12. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Gesundheitsprodukt für den Hausgebrauch. Es kann nicht für die Diagnose oder Therapie vorhandener Krankheiten oder etwaige kommerzielle Zwecke genutzt werden.
13. Zur Reinigung bitte mit einem mit medizinischem Alkohol getränkten Baumwolltuch abreiben. Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit Wasser.
14. Das Massagegerät verfügt über eine Heiß-Komresse-Funktion, bei der die Temperatur bis zu 42 °C erreichen kann. Temperatursensible Personen sollten bei der Anwendung besonders sorgfältig sein.

Problembehebung

Sollten bei dem Betrieb des Gerätes Probleme auftreten, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen. Zerlegen oder reparieren Sie das Gerät niemals selbst.

Störung	Mögliche Gründe	Lösungen
Probleme bei der Inbetriebnahme	<ul style="list-style-type: none">• Ist die Power-Taste eingeschaltet?• Ist die Lithium-Batterie des Massagegerätes schwach?• Ist die Batterie der Fernbedienung schwach?	<ul style="list-style-type: none">• Schieben Sie die Taste auf die Position ON (Ein)• Falls ja, bitte wechseln Sie die Batterie des Gerätes umgehend.• Bitte legen Sie neue Batterien in die Fernbedienung ein.
Geringer Luftdruck oder geringe Vibration	Ist der Lithium-Akku des Massagegerätes schwach?	Falls ja, laden Sie den des Geräts komplett auf.

Technische Parameter

Gleichstromversorgung:	DC: 5V 5W
Ideale Umgebungsbedingungen:	Temperatur 5 °C ~ 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit ≤80 %
Abmessungen:	Massagegerät: L 282 mm x B 206 mm x H 254 mm Fernbedienung: L 132 mm x B 44 mm x H 24 mm
Gewicht:	1.125 g

Aufbewahrung:

1. Sollte die Lagerzeit 6 Monate übersteigen, überprüfen Sie bitte das Gerät und laden Sie es neu auf.
2. Vom Boden, von Wänden und vom Dach entfernt lagern.
3. Auf gute Belüftung achten und vor direkter Sonneneinstrahlung und vor korrosiven Gasen schützen.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülß 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Toernooiveld 300 · NL 6525 EC Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Carriage House · Forde Road · Newton Abbot · TQ12 4EY · Tel.: 0844 846 5050

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 22 77

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen