

GERMAN

# Scalp Mini

KOPFHAUT-MASSAGEGERÄT

---

## BEDIENUNGS- ANLEITUNG

---

breo

---

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt  
aus dem Hause Breo entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung  
vor dem Gebrauch sorgfältig durch und  
bewahren Sie sie zum späteren  
Nachschlagen sorgfältig auf.

---

## Einführung

---

Die Funktion des Breo Kopfhaut-Massagegeräts Scalp Mini basiert auf der traditionellen chinesischen Massagetheorie. Seine vier Massageköpfe (jeder mit 24 fingerähnlichen Kontaktpunkten) beherrschen sechs traditionelle Massagetechniken: Dehnen, Raffén, Drücken, Ziehen, Reiben und Greifen. Der Scalp Mini bietet eine umfassende 3D-Tiefenmassage.

Das Hauptgerät ist wasserdicht nach IPX7, passt sich Nässe an und kann auch während des Duschens verwendet werden.



Massage im Bereich  
der Schläfen



Verbesserung der Mikro-  
zirkulation im Kopfbereich



Entspannung  
im Stirnbereich



Lockerung der  
Nackelmuskulatur

# Konfiguration des Produkts und der Funktionen

---

## Konfiguration des Produkts

Das Produkt umfasst das Massagegerät, die Ladestation, das USB-Ladekabel, das Reinigungstuch und die Bedienungsanleitung.



das Massagegerät



die Ladestation



das Reinigungstuch




das USB-Ladekabel



Bedienungsanleitung

## Funktionelle Konfiguration

1. Leistungsdiagramm
2. Anzeigen
3. Ladestation
4. Ladeanschluss
5. Massage-Kontakt

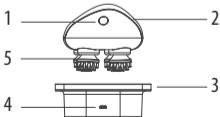

# Gebrauchsanweisung

---

## Vorbereitungen für die Verwendung

Bitte überprüfen Sie, ob das Produkt mit all seinen Zubehörteilen vollständig vorliegt. Bitte prüfen Sie das Netzteil auf Beschädigungen.

## Aufladen

1. Stellen Sie das Massagegerät auf die Ladestation, die mit dem Original-Netzteil dieses Produkts verbunden sein muss;
2. Während das Gerät aufgeladen wird, blinkt die weiße Kontrollleuchte; nach vollständiger Aufladung leuchtet sie dauerhaft;
3. Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht verwendet werden. Wenn Sie es während des Gebrauchs aufladen, wird automatisch ein Schutzprogramm aktiviert, das den Betrieb unterbricht;
4. Der Ladevorgang dauert 2 bis 3 Stunden.

## Ausschalten

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand eine Weile auf POWER, um das Gerät auszuschalten.



## Modus-Auswahl

Wenn Sie das Gerät starten wollen, drücken Sie auf POWER, um den gewünschten Modus einzuschalten.

Modus 1: Schneller Rotationsmodus; die weiße Anzeige blinkt einmal auf und leuchtet dann dauerhaft;

Modus 2: Langsamer Rotationsmodus; die weiße Anzeige blinkt zweimal auf und leuchtet dann dauerhaft;

Modus 3: Abwechselnd schnelle und langsame Rotation; die weiße Anzeige blinkt dreimal auf und leuchtet dann dauerhaft

## Bitte beachten Sie:

---


Um eine korrekte und sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die **BEDIENUNGSANLEITUNG** vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Das Unternehmen übernimmt bei unsachgemäßer Nutzung oder Nichtbeachtung der **BEDIENUNGSANLEITUNG** keinerlei Haftung.

1. Das Gerät bitte nicht zur Massage von Körperteilen verwenden, an denen ein chirurgischer Eingriff vorgenommen wurde. Beachten Sie die Anweisungen des Arztes.
2. Bitte nicht zur Massage von Hautpartien verwenden, die Verletzungen, Reizungen, Entzündungen oder Stauungen etc. aufweisen.
3. Personen mit verzögerten Reaktionen, körperlichen oder geistigen Einschränkungen oder Dysgnosie dürfen dieses Produkt nicht verwenden. Folgen Sie ggf. den Anweisungen des Arztes.

## Bitte beachten Sie:

---

4. Dieses Produkt ist ausschließlich als elektronisches Gesundheitsprodukt konzipiert und darf nicht für medizinische Diagnosen, Behandlungen und andere kommerzielle Zwecke eingesetzt werden.
5. Kinder, schwangere Frauen und Frauen während ihrer Menstruation dürfen das Produkt nicht verwenden.
6. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, während Sie am Steuer eines Fahrzeugs sitzen! Halten Sie sich strikt an die Verkehrsvorschriften!

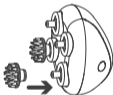

## Bitte beachten Sie:

---

7. Bitte verwenden Sie unseren Original-Netzadapter und achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit.
8. Bitte verwenden Sie zur äußeren Reinigung des Produkts in Alkohol getauchte Baumwolle! Kein Wasser zur Reinigung benutzen!
9. Bitte das Gerät vor Stößen schützen und nicht fallen lassen.  
Bitte verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, die das Gerät zerkratzen oder beschädigen können.
10. Minderjährige dürfen das Gerät nur in Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten oder anderer Erwachsener verwenden.
11. Sollte es während des Gebrauchs Auffälligkeiten geben, das Gerät bitte sofort von der Stromversorgung trennen und das Unternehmen kontaktieren.  
Bitte nehmen Sie Reparaturen nicht selbst vor.
12. Die Anwendung sofort abbrechen, wenn Sie sich dabei unwohl fühlen.



## Fehlerbehebung

---

Im Falle einer Betriebsstörung ist Folgendes zu überprüfen: Wenn der Fehler nicht behoben werden kann oder das Gerät nicht normal funktioniert, trennen Sie es bitte von der Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundendienst.  
Sie dürfen das Gerät nicht selbst auseinander nehmen oder reparieren.

Grundlegende Defekte	Mögliche Gründe	Fehlerbehebung
Gerät kann nicht eingeschaltet werden	Bitte prüfen Sie, ob alle Kabel frei von Beschädigungen sind	Bitte überprüfen Sie alle Kabelverbindungen
	Bitte prüfen Sie, ob die Batterieleistung ausreichend ist	Ggf. Batterie austauschen
	Bitte prüfen Sie, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist	Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig angeschlossen ist
Luftdruck und Vibration sind zu schwach	Bitte prüfen Sie, ob die Batterieleistung ausreichend ist	Ggf. Batterie austauschen
	Bitte prüfen Sie, ob das Gerät ausreichend mit Strom versorgt wird	Ggf. zum Aufladen an das Netzteil anschließen

# Technische Spezifikationen

---

Bezeichnung: Kopfhaut-Massagegerät

Made in China

Modell: Scalp Mini

Abmessungen: 110 mm x 120 mm x 82 mm

Nettogewicht: 320g

Leistung: 5W

Material: ABS-Kieselgel

Spannung: 5V =

Netzadapter: 5V = 1A



DE 19863741

Artikelnummer: 231-429

## Importeur:

SHP International Trading GmbH  
Rathausstraße 5, D-96342 Stockheim  
[www.shp-company.com](http://www.shp-company.com)