

# **Lifenaxx Nackenmassagegerät LX-046**

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung dieses Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe des Produkts sorgfältig auf. Machen Sie dasselbe mit dem Originalzubehör für dieses Produkt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

## **Genießen Sie Ihr Produkt. \* Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.**

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Bitte verwenden Sie unbedingt das neueste Handbuch, das auf der Website des Herstellers verfügbar ist.

### **Inhaltsverzeichnis**

Hinweise.....	2	Laden .....	6
Sicherheitshinweise.....	2	Gerät ein- /ausschalten .....	6
Sicherheitsregeln	für	Technische Spezifikationen.....	6
wiederaufladbare Batterien .....	4	Unterstützung .....	6
Warnhinweise.....	4	Pflege und Wartung.....	7
Haftungsausschluss .....	4	Konformitätserklärung .....	7
Merkmale.....	5	Entsorgung .....	7
Produktübersicht .....	6		

### **Hinweise**

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Beschädigen Sie das Produkt nicht. In den folgenden Fällen kann das Produkt beschädigt werden: Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), unsachgemäßer oder missbräuchlicher Gebrauch des Produkts, Insekten, Manipulation oder Modifikation des Produkts durch andere Personen als autorisiertes Servicepersonal, Kontakt mit ungewöhnlich korrosiven Materialien, Einführen von Fremdkörpern in das Gerät, Verwendung mit nicht vorab genehmigtem Zubehör.

Lesen und beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Bedienungsanleitung. Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen im Benutzerhandbuch. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss diese entsorgt werden. Lässt sich die Netzanschlussleitung nicht entfernen, muss das Gerät entsorgt werden. Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen beim Umgang mit dem Gerät vorsichtig sein.

### **Sicherheitshinweise**

- Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Kabel, da sonst die Schutzfunktion verloren gehen

kann. Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.

- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel. Das Kabel könnte sonst reißen.
- Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel oder andere Kabel nicht, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Reinigungssprays. Das Produkt darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder an Orten, an denen die Temperatur über einen längeren Zeitraum 50 °C überschreiten kann.
- Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

### **Benutzen Sie das Massagegerät nicht:**

- an Tieren
- wenn Sie an einer medizinischen Anomalie oder Verletzung im zu massierenden Bereich leiden (z. B. Bandscheibenvorfall, offene Wunden)
- auf keinen Fall für Massagen im Herzbereich, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen – und  
Bezüglich anderer Körperteile konsultieren Sie Ihren Arzt
- auf geschwollenen, verbrannten, entzündeten oder beschädigten Haut- und Körperteilen aller Art
- bei Schnittwunden, Äderchen, Krampfadern, Akne, Couperose , Herpes oder anderen Hauterkrankungen
- am Kopf oder an harten Körperteilen (zB Knochen und Gelenke)
- während der Schwangerschaft
- im Gesicht (Augen), am Kehlkopf oder anderen besonders empfindlichen Körperteilen
- für Fußmassagen
- beim Schlafen
- nach der Einnahme von Medikamenten oder Alkohol (verminderte Wahrnehmung!)
- auf Haut mit zuvor aufgetragener Creme (zB wärmende Salbe),
- in Fahrzeugen.

### **Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Massagegerät verwenden, insbesondere:**

- wenn Sie an einer schweren Krankheit leiden oder sich kürzlich einer Operation am Oberkörper unterzogen haben

- wenn Sie einen Herzschrittmacher, Implantate oder andere Hilfsmittel tragen
- wenn Sie an einer Thrombose leiden
- wenn Sie an Diabetes leiden
- wenn Sie unter Schmerzen unbekannter Ursache leiden

## **Sicherheitsregeln für wiederaufladbare Batterien**

Das Produkt verwendet wiederaufladbare Batterien und kann überall hin mitgenommen werden, wo Sie sie brauchen. Aber ALLE Batterien können EXPLOSIONEN, FEUER FANGEN und VERBRENNUNGEN VERURSACHEN, wenn sie zerlegt, durchstochen, geschnitten, gequetscht, kurzgeschlossen, verbrannt oder Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Sie müssen daher vorsichtig mit ihnen umgehen.

Um die wiederaufladbaren Batterien sicher zu verwenden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Lassen Sie den Akku oder das Batteriefach NIEMALS nass werden.
- Batterien NIEMALS zerlegen, aufschneiden, zerdrücken, durchstechen, kurzschließen, ins Feuer oder Wasser werfen oder den Akku Temperaturen über 50 °C aussetzen.

## **Warnhinweise**

- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu Kurzschlüssen oder Schäden führen kann.
- Die Lebensdauer der Batterie verringert sich mit der Nutzung. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf, um sie zu schonen, falls das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
- Batteriewarnung: Unsachgemäßer Umgang mit der Batterie kann zu Feuer oder Verätzungen führen. Die Batterie kann im Schadensfall explodieren.
- Nehmen Sie keine Änderungen, Reparaturen oder Demontagen ohne professionelle Anleitung vor.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder flüchtigen Flüssigkeiten.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dadurch die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigt werden können.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

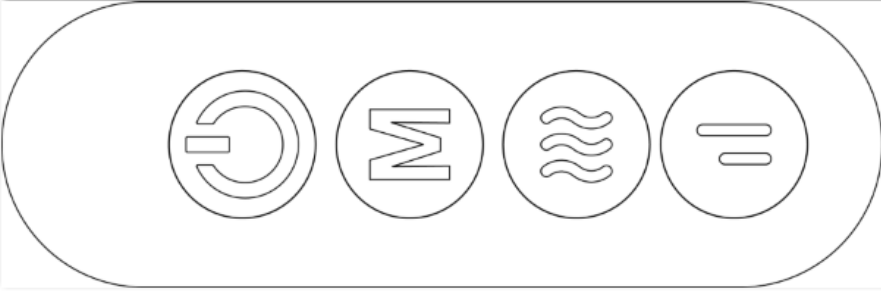




## **Haftungsausschluss**

- In keinem Fall haftet Technaxx Deutschland für direkte oder indirekte strafbare, zufällige oder besondere Folgegefahren für Eigentum oder Leben, unsachgemäße Lagerung, was auch immer, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch ihrer Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.

## **Merkmale**

- Das Massagegerät passt sich problemlos an verschiedene Körperteile an.
- Die wohltuende Wärme kann ausgeschaltet werden.
- Intensität und Verlauf der Massage bestimmen Sie selbst.
- Mit 2 verschiedenen Modi und 2 unterschiedlich einstellbaren Geschwindigkeiten steigert es das Wohlbefinden, lindert Schmerzen, Muskelkater, Krämpfe und Muskelverspannungen.
- Das Massagegerät eignet sich für die Anwendung an Nacken, Schultern, Rücken, Taille, Bauch, Armen und Beinen.
- 2 Modi
- 2 verschiedene Geschwindigkeiten

## Produktübersicht

Bedienfeld			
			
	Ein / Aus Schalter		Programm
	Wärme (LED rot -> an, LED grün -> aus)		Geschwindigkeit

### Laden

●Verbinden Sie das USB-C-Kabel am Gerät mit einem USB-Adapter\* (\*nicht im Lieferumfang enthalten).

**Hinweis:** Der erste Ladevorgang dauert etwa 3 Stunden, die ROTE LED blinkt, solange der Artikel geladen ist.

### Gerät ein- /ausschalten

Positionieren Sie das Massagegerät an einer ausgewählten Stelle Ihres Körpers

Halten Sie den Einschaltknopf gedrückt, bis er rot leuchtet

## Technische Spezifikationen

Batteriekapazität	2000 mAh, 7,4 V
Nennleistung	10 W
Kabellose Nutzung mit USB-Kabel und Type-C-Ladeanschluss	Keine Verwendung während des Ladevorgangs
Automatische Abschaltfunktion nach 10 Minuten	
Die Heizung im Inneren konnte abgeschaltet werden.	

## Unterstützung

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9.00 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr erreichbar

## Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselneutrem Tuch.

Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel.

Um Schäden zu vermeiden, vermeiden Sie bitte die folgenden Vorgehensweisen:

- Verwenden Sie das Gerät bei extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen.
- Liefern oder verwenden Sie es in einer Umgebung mit starken Erschütterungen.

## Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in der unteren Leiste „Konformitätserklärung“).

## Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Sortieren Sie die Verpackungsmaterialien bei der Entsorgung nach Typ.

Entsorgen Sie Pappe und Pappe im Altpapier. Folien sollten der Wertstoffsammlung zugeführt werden.



Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Sammlung wiederverwertbarer Materialien) Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr nutzbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Landkreises, abzugeben. Damit stellen Sie sicher, dass die Altgeräte einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrogeräte sind deshalb mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Stadt oder im Handel abzugeben, um sicherzustellen, dass die Batterien entsorgt werden können auf umweltfreundliche Weise. \* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie Ihr Produkt mit vollständig entladenelem Akku an Ihrer Sammelstelle ab!



In China hergestellt

Vertrieben von:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck , Deutschland

Nackenmassagegerät LX-046