

# GEMO

## Anti Aging Device

### Usage Instructions

"Anti-aging" refers to skin results such as anti-wrinkle, firming, etc., as per third-party reports. Individual results may vary.

# Anti-Aging-Gerät

## Gebrauchsanweisung

G10

Vielen Dank, dass Sie sich für das GEMO Kosmetikgerät entschieden haben!

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, können Sie uns jederzeit  
über unsere Website oder per E-Mail kontaktieren.

Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung!

[info@gemoglobal.com](mailto:info@gemoglobal.com)



Kingsmead Service B.V.  
Zonnehof 36, 2632 BE, Nootdorp, Niederlande  
[office@kingsmead-service.com](mailto:office@kingsmead-service.com)



Zhejiang Gemo Supply Chain Management Co., Ltd.  
Room 3215, 3rd Floor, Building A, No. 482 Qianmo Road, Xixing Street,  
Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, P.R. China

Zur ordnungsgemäßen und sicheren Anwendung dieses Geräts beachten Sie bitte genauestens die mitgelieferte Gebrauchsanweisung. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung nach dem Lesen auf, um sie künftig als Referenz verwenden zu können. Bitte geben Sie das Gerät immer zusammen mit dieser Gebrauchsanweisung an einen anderen Abnehmer weiter.

Nach Berichten Dritter bezieht sich „Anti-Aging“ auf kosmetische Wirkungen auf die Haut, wie z. B. Faltenreduzierung und Straffung. Individuelle Ergebnisse können variieren.

## Hinweis zur Verwendung

Sehr geehrte Kunden, vielen Dank, dass Sie das Luxus-Kosmetikgerät G10 von Zhejiang Gemo Supply Chain Management Co, Ltd. (im Folgenden als „wir“ bezeichnet) verwenden. Zur ordnungsgemäßen und sicheren Anwendung dieses Geräts beachten Sie bitte genauestens die mitgelieferte Gebrauchsanweisung. Bei Fragen zur Anwendung wenden Sie sich bitte an uns, damit wir Ihnen einen umfassenderen Kundenservice bieten können.

## Rechte an geistigem Eigentum

Wir besitzen das Urheberrecht an dieser Gebrauchsanweisung und haben das Recht, sie als vertrauliche Information zu behandeln. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens darf niemand diese Gebrauchsanweisung kopieren, vervielfältigen oder in andere Sprachen übersetzen.

## Haftungsausschluss

Nur bei strikter Einhaltung der folgenden Anweisungen zur Anwendung übernehmen wir die Haftung für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Funktion dieses Geräts.

- Die Einstellung und Wartung dieses Geräts sollte von seitens des Unternehmens speziell geschultem Wartungspersonal durchgeführt werden.
- Die wesentlichen elektrischen Bauteile und die Arbeitsumgebung müssen den geltenden Normen, Vorschriften und Richtlinien entsprechen.
- Das Gerät ist nur gemäß Gebrauchsanleitung zu bedienen.
- Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.

Sicherheitshinweise	01
Kontraindikationen	06
Verwendungszweck und Anwendungsbereich	07
Funktionsprinzipien	07
Geräteaufbau	08
Wichtigste Leistungsparameter	09
Anweisungen für Installation und Anwendung	10
Betriebshäufigkeit	17
Wahl von Gel oder Essenz	18
Verfahren zur Reinigung, Desinfektion, Wartung und Pflege	18
Lager- und Transportbedingungen	19
Kalibrierung und Wartung	19
Problembehandlung	20
Wichtigste Sicherheitsfunktionen	21
Zubehörliste	21
Beschreibung der Grafiken und Symbole	22
Erklärung zur Entsorgung des Geräts	22
Gewährleistung und Garantie	23
Elektromagnetische Verträglichkeit	23

# Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise umfassen die Bereiche Gefahr, Warnung, Vorsicht und Achtung und weisen auf mögliche Gefährdungen bei Missachtung hin. Deshalb sind diese Anweisungen genauestens zu beachten.

	GEFAHR: (Bezieht sich auf) Sicher eintretende schwere Unfälle durch unsachgemäße Anwendung des Geräts
	WARNUNG: (Bezieht sich auf) Mögliche schwere Unfälle durch unsachgemäße Anwendung dieses Geräts
	VORSICHT: (Bezieht sich auf) Mögliche Personen- oder Sachschäden durch unsachgemäße Anwendung dieses Geräts

## WARNUNG: Potenzielle Risiken der Anwendung des Produkts in einer unsicheren Umgebung

Dieses Kosmetikgerät mit HF-Technik sollte aufgrund der Verletzungsgefahr in einem sicheren Innenbereich verwendet werden, der trocken und frei von ätzenden Gasen oder starker direkter Sonneneinstrahlung ist.

- Bitte verwenden, laden oder lagern Sie das Produkt nicht an ungeeigneten Orten, an denen es z. B. starken elektromagnetischen Feldern, Staub, Öl- oder Wasserdampf, hohen Temperaturunterschieden (durch Klimaanlage, Heizungen usw.) ausgesetzt ist, oder im Freien.
- Bitte verwenden, laden oder lagern Sie das Produkt nicht an Orten, die anfällig für Schwingungen, Kippbewegungen, Stöße oder Instabilitäten sind, da Sturz- und Schlageinwirkungen vermieden werden müssen.
- Setzen Sie das Gerät keiner übermäßig feuchten Umgebung aus, da sie Stromverlust oder gar Ausfälle hervorrufen kann.
- Setzen Sie das Hauptgerät zudem keiner korrosiven Umgebung aus, da dies zum Einrosten, zur Unlesbarkeit der Anzeige und zur Kontamination der Elektrodenspitze führen kann.
- Bitte halten Sie das Gerät bei der Anwendung und Lagerung von Verschmutzung und Abfall fern.

## WARNUNG: Mögliche Risiken durch bakterielle Infektionen

- Das Gerät ist für den persönlichen Gebrauch bestimmt, daher sollten Sie es nicht mit anderen Personen teilen. Falls es doch von mehr als einer Person verwendet werden soll, reinigen und desinfizieren Sie die Elektrodenspitze bitte vor dem Gebrauch, Andernfalls kann das Gerät eine Kreuzkontamination verursachen.

## WARNUNG: Biologische Risiken

- Falls Sie in der Vergangenheit allergisch auf das Gerät reagiert haben, meiden Sie bitte den direkten Kontakt und verwenden es nicht mehr. Suchen Sie außerdem ärztliche Hilfe auf, falls bei Kontakt eine allergische Reaktion auftritt.

## **!** WARNUNG: Potenzielle Risiken des Eindringens von Flüssigkeiten

- Das Gerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Achten Sie deshalb darauf, dass es nicht mit Wasser in Berührung kommt. Bitte achten Sie zudem darauf, dass keine Flüssigkeit in das Hauptgerät eindringt und dass kein Teil des Geräts in Flüssigkeit getaucht wird. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen.
- Bitte verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Duschen, Badewannen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern. Bitte achten Sie darauf, dass Gerät und Netzteil immer trocken bleiben.

## **!** WARNUNG: Potenzielle Brandgefahr

- Halten Sie das Gerät bitte von brennbaren Materialien und Feuerquellen fern.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von explosiven und entflammaren Stoffen wie Alkohol, Verdünnungsmitteln, Benzin, Nagellackentfernern oder Sprays.
- Bitte verwenden Sie dieses Gerät nicht zusammen mit brennbaren Kosmetika.
- Bitte lagern, laden oder verwenden Sie das Produkt nicht an heißen Stellen, z. B. in der prallen Sonne, an offenem Feuer oder Heizkörpern. Achten Sie auch darauf, das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten wie Öfen abzulegen.
- Bitte legen Sie die Elektrodenspitze nicht direkt auf brennbare Materialien, damit sie keinen Kurzschluss verursacht und keinen Brand auslöst.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer sauerstoffangereicherten Atmosphäre, da dies die Brand- oder Explosionsgefahr wesentlich erhöht.

## **!** WARNUNG: Mögliche Risiken durch falsche Parametrierung

- Wenden Sie dieses Gerät nicht auf die Lider an, es besteht Verletzungsgefahr durch übermäßige Energieabgabe.

## **!** WARNUNG: Mögliche Risiken bei unsachgemäßer Anwendung

- Bitte vergewissern Sie sich bei der Anwendung, dass alle funktionalen Komponenten intakt und vollständig vorhanden sind, damit das Gerät unter maximaler Sicherheit eine höhere kosmetische Wirkkraft erzielt.
- Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen bzw. Behinderungen oder mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen bei der Anwendung, Reinigung und Wartung des Geräts sollten das Gerät nur unter Anleitung und Aufsicht ihres Betreuers bedienen.
- Sehen Sie nicht direkt in die LED. Verbrennungen der Netzhaut können die Folge sein.
- Bitte lassen Sie das Gerät nach dem Einschalten nicht unbeaufsichtigt und schalten Sie es nach Gebrauch zeitnah aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zu häufig und nicht regelmäßig in Kombination mit ähnlichen Geräten (z. B. in Schönheits- und Wellness-Einrichtungen).
- Bitte wenden Sie das Geräte nicht bei Haustieren an. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Bitte bedienen Sie dieses Gerät nicht in unangemessener Weise und nur für die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Verwenden Sie das Gerät nicht gleichzeitig mit anderen elektrischen Geräten (einschließlich anderen Kosmetikgeräten, Heizdecken und elektrischen Heitzischen), sobald der Strom eingeschaltet ist.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit anderen elektrischen Geräten in Berührung kommt, wenn es eingeschaltet ist. Berühren Sie außerdem die Elektrodenspitze nicht mit Metallgegenständen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht unter Kleidung/Stoff.
- Entfernen Sie unbedingt Ihr Make-up, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Wickeln Sie das Hauptgerät nicht mit Bettwäsche, Decken, Handtüchern o. Ä. ein.
- Nach dem Auspacken sollten Sie den Plastikbeutel ordnungsgemäß aufbewahren oder entsorgen, um zu verhindern, dass Kinder damit spielen und daran ersticken.
- Bewahren Sie das Gerät während der Lagerung und Anwendung außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Menschen mit psychischen Erkrankungen auf.
- Bitte verwenden Sie die Elektrode nicht im Brustbereich, da dies das Risiko von Herzflimmern erhöhen kann.



### WARNUNG: Mögliche Risiken bei unsachgemäßer Anwendung

- Sämtliche Veränderungen am Gerät, die dessen Funktionsfähigkeit beeinträchtigen, wie z. B. das Zerlegen, Reparieren und Nachrüsten des Hauptgeräts, sind nicht gestattet. Nur zugelassenes, vom Hersteller empfohlenes Personal darf diese Veränderungen vornehmen.
- Sollte die Haut bei der Anwendung zu warm werden oder eine andere ungewöhnliche Veränderung auftreten, wenden Sie sich bitte sofort an den Lieferanten oder Ihren Arzt und passen Sie den Modus gemäß den ärztlichen Anweisungen an.



### WARNUNG: Mögliche Risiken durch die Stromversorgung

- Versuchen Sie nicht, Hauptgerät, Netzteil oder Netzkabel selbst zu zerlegen, zu modifizieren, zu reparieren oder auszubessern. Außerdem darf das Netzkabel nicht geknickt, verdreht oder gezogen werden.
- Das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, aufladen oder aufbewahren, wie z. B. in der Nähe von Wasser, im Badezimmer oder am Waschbecken. Halten Sie außerdem Hauptgerät, Netzteil und Netzkabel von Wasser fern.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil/-kabel. Kontrollieren Sie vor der Anwendung, ob der mitgelieferte Stecker Ihren landesspezifischen Steckdosen entspricht.
- Falls die Stromversorgung instabil ist und außerhalb des angegebenen Spannungsbereichs liegt, installieren Sie bitte einen Spannungsregler, bevor Sie das Gerät verwenden. Andernfalls wird die kosmetische Wirkung beeinträchtigt.
- Schalten Sie das Gerät nicht in Reihe oder parallel zu anderen Geräten. Wenn der Nennbereich durch eine mehrkanalige Parallelschaltung überschritten wird, kann es zu einem Brand kommen.
- Ziehen Sie unbedingt das Netzteil aus der Steckdose, falls der Strom während der Anwendung ausfällt.
- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil des Herstellers. Die Verwendung eines Netzteils, das die Anforderungen nicht erfüllt, kann Schäden am Hauptgerät verursachen.



### WARNUNG: Mögliche Risiken eines Stromschlags

- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Kontaktlinsen oder Metallschmuck wie Brillen, Halsketten, Ohrringe, Uhren und Ringe tragen.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Hauptgeräts nicht. Es besteht Stromschlaggefahr.
- Halten Sie Gerät und Netzteil trocken und fassen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an.
- Wenn der Netzstecker an einer Steckdose eingesteckt ist und Stecker oder Netzkabel beschädigt oder lose sind, dürfen Sie das Gerät nicht benutzen.
- Ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch aus der Steckdose, aber nicht am Kabel. Bitte stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder aus, da Sie sich sonst der Gefahr eines Stromschlags aussetzen.
- Bitte ersetzen oder verändern Sie das mitgelieferte Netzteil nicht, da es auf seine Normgerechtigkeit geprüft wurde. Ein nicht zugelassenes Netzteil kann die Sicherheit des Geräts gefährden und zu Sicherheitsrisiken führen, wie z. B. Stromschlag, Überhitzung und Kurzschluss. Fordern Sie im Falle eines Defekts des Netzteils bei Hersteller oder Händler Ersatz an.



## WARNUNG: Risiken im häuslichen Umfeld

- Das Gerät ist für die Anwendung im Heimgebrauch bestimmt. Bitte verwenden Sie dieses Gerät nicht mit Hochfrequenz-Elektrotomen, Mikrowellen-, Kurzwellen- oder HF-Geräten sowie anderen stark magnetischen Geräten, die das Produkt in Brand setzen oder beschädigen könnten. Außerdem dürfen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kurzwellen- oder Mikrowellen-Kosmetikgeräten (z. B. 1 m) verwenden, da diese eine instabile Mikrostromabgabe anregen können.
- Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder können beim Spielen einen elektrischen Schlag bekommen, kleine Teile verschlucken oder das Produkt beschädigen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen, da aufgrund des langen Netzkabels Erstickungsgefahr droht.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker (dadurch wird der elektrische Kontakt unterbrochen). Ziehen Sie den Stecker nicht mit Gewalt heraus, da sonst das Netzkabel beschädigt werden oder reißen kann.



## VORSICHT: Durch unsachgemäße Lagerung bedingte Risiken

Eine ordnungsgemäße Lagerung ist für die normale Anwendung von Kosmetikgeräten mit HF-Technik sehr wichtig. Daher sollte das Gerät auf einer sicheren Oberfläche abgelegt werden, und es sollte auf den Schutz der Elektrodenspitze geachtet werden.

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, prüfen Sie bitte vor der Wiederinbetriebnahme, ob es normal gestartet werden kann.
- Bitte bewahren Sie Hauptgerät und Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Achten Sie darauf, dass Sie keine schweren Gegenstände auf das Hauptgerät legen oder mit Gewalt darauf drücken.
- Legen Sie das Gerät nicht in einen Mikrowellenherd oder einen Hochdruckbehälter.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über einen längeren Zeitraum angeschlossen bleibt. Ziehen Sie nach der Anwendung des Hauptgeräts bei Wartungsarbeiten am Hauptgerät oder im Falle eines Gewitters oder Erdbebens immer den Netzstecker.
- Bitte prüfen Sie vor der Anwendung, ob die Elektrodenspitze verformt, gerissen oder beschädigt ist. Sollte dies der Fall sein, setzen Sie das Gerät bitte nicht in Betrieb.
- Legen Sie ein Kosmetikgerät mit HF-Technik nicht in einen gefüllten Tank.
- Wenn das Gerät gerade nicht benutzt wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Es besteht Würge- oder Stolpergefahr.



## VORSICHT: Transportbedingte Risiken

- Bei Transporten sollten Sie das Gerät nicht mit schweren Gegenständen belasten und Erschütterungen vermeiden. Andernfalls kann es zu einem Ausfall des Hauptgeräts kommen.
- Bitte gehen Sie mit dem Gerät vorsichtig um und schützen Sie es vor Regen. Andernfalls könnte es zu Störungen und Unfällen kommen.



## VORSICHT: Risiko einer Verkürzung der Nutzungsdauer des Geräts

- Bitte verwenden Sie weder Benzin, Nagellackentferner, Verdünnungsmittel, Dieselöl noch andere Lösungsmittel zum Reinigen des Geräts.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch zuerst aus, und entfernen Sie erst danach Schmutz oder etwaige Produktrückstände von Hautpflegeprodukten gemäß den Anweisungen.
- Schalten Sie das Kosmetikgerät nicht unnötig ein und aus. Bei Bedarf empfiehlt es sich, vor dem Wiedereinschalten das Gerät 3–5 Minuten ausgeschaltet zu lassen.
- Es wird empfohlen, eine Betriebszeit von 60 Minuten nicht zu überschreiten.

## ! WARNUNG

- Das Gerät darf nur für die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Beseitigen Sie es vorschriftsgemäß.

## ! Hinweise zur sicheren Anwendung

Bevor Sie Gerät und Gel bzw. Essenz zum ersten Mal verwenden, führen Sie zuerst einen Hautverträglichkeitstest durch. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

i) Reinigen Sie die Innenseite Ihres Arms mit dem Reinigungsprodukt und trocknen Sie die Haut mit einem Handtuch ab.

ii) Tragen Sie eine ausreichende Menge Gel oder Essenz auf die Innenseite Ihres Arms auf und lassen Sie das Gerät dann 3 Minuten im V-MAX-Modus über die Haut gleiten.

Sie sollten das Gerät nur dann verwenden, wenn innerhalb von 5 Minuten im Testbereich keine Hautreizungen auftreten, z. B. eine anhaltende Rötung oder ein Brennen. Wenn Sie innerhalb von 24 Stunden vor oder nach dem Test Hautausschlag, Juckreiz oder andere Anomalien feststellen, brechen Sie bitte den Test ab und verwenden Sie dieses Produkt nicht!

- Bitte passen Sie Stufe und Modus an Ihre Haut an. Wenn sich die Haut noch nicht daran gewöhnt hat oder Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, sollten Sie es zunächst auf niedriger Stufe anwenden. Achten Sie außerdem darauf, dass die Dauer seiner Anwendung im V-MAX-Modus 6 Minuten, im FACE-Modus 10 Minuten und im EYE-Modus 4 Minuten nicht übersteigen sollte.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät über die Haut gleitet und nicht wiederholt einen längeren Zeitraum auf derselben Stelle verweilt.
- Tragen Sie stets ausreichend Gel oder Essenz auf, damit die Elektrodenspitze sanft über die Haut gleiten kann.
- Wenn Sie ein Kribbeln in der Haut zu spüren beginnen, verringern Sie die Intensitätsstufe oder versetzen Sie das Gerät an eine andere Stelle.
- Der Verträglichkeitstest sollte mindestens 24 Stunden vor der tatsächlichen Anwendung des Geräts an derselben Stelle durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit Spezialgel bzw. -essenz.
- Verwenden Sie das Gerät bei der Gesichtspflege nicht an den in der Abbildung ausschattierten Bereichen:



- i) innerhalb der Augenhöhle wie z. B. am oberen Augenlid, den Augäpfeln o. Ä.,
- ii) auf den Lippen (einschließlich Ober- und Unterlippen) oder im Mund.

## Kontraindikationen

- Säuglinge, Kinder unter 18 Jahren, Jugendliche und Frauen während der Menstruation, Stillzeit und Schwangerschaft.
- Folgende Patientengruppen mit tragbaren medizinischen Geräten oder Implantaten sollten dieses Medizinprodukt auf keinen Fall verwenden, da es dabei zu einem Ausfall kommen kann.
- Auch sollten Personen, die im Rahmen eines Schönheitschirurgischen Eingriffs derzeit oder im vergangenen Jahr Botulinumtoxin-Injektionen oder Silikon-, Kollagen-, Fett- oder Einspritzungen von synthetischen Materialien oder Implantate diverser Art erhalten haben oder noch erhalten, von der Anwendung dieses Geräts Abstand nehmen. Betroffen sind dabei:
  - i) Personen, die zu medizinischen Zwecken elektronische Medizinprodukte wie Herzschrittmacher oder interne Defibrillatoren implantiert bekommen haben;
  - ii) Personen, die Medizinprodukte zur Lebenserhaltung benutzen, wie z. B. künstliche Herz-Lungen-Maschinen;
  - iii) Personen, die tragbare elektrische Medizinprodukte wie Infusionssets und Elektrokardiographen verwenden;
  - iv) Personen mit Metallimplantaten (z. B. Metallklammern und Zahnprothesen) und aktiven Implantaten zur Aufrechterhaltung von Körperfunktionen.
- Dazu kommen Personen mit einer der folgenden Erkrankungen, die dieses Gerät ebenfalls nicht verwenden sollten:
  - i) Patienten mit Herzfunktionsstörungen, Herzerkrankungen oder einer Tendenz zu Herzfunktionsstörungen;
  - ii) Personen, die ihr Bewusstsein nicht artikulieren oder Temperatur und Stimulation nicht wahrnehmen können;
  - iii) Patienten mit Autoimmunerkrankungen, AIDS, Hepatitis C, Syphilis oder Patienten, die immunsuppressive Medikamente einnehmen;
  - iv) Personen mit kollagenen Gefäßerkrankungen;
  - v) Personen mit Dermatose, vererbter Dermatitis, allergischer Dermatitis, Vernarbungen oder empfindlicher und brüchiger Haut;
  - vi) Personen, bei denen ein aktiver bösartiger Tumor oder innerhalb der vergangenen fünf Jahre ein vorausgegangener bösartiger Tumor diagnostiziert wurde oder bei denen eine Krebserkrankung vorlag, die eine Lymphknotenbiopsie oder -dissektion erforderte;
  - vii) Personen mit einem offensichtlichen hormonellen Ungleichgewicht, Lymphadenopathie, Diabetes (Typ I oder II), Lupus, Porphyrie oder relevanten neurologischen Störungen (d. h. jegliche Krankheit, die nach Ansicht der Ärzte den Behandlungsprozess beeinträchtigen könnte);
  - viii) Personen, die 6 Monate vor oder parallel zur kosmetischen Behandlung eine systemische Glukokortikoidbehandlung erhalten haben;
  - ix) Personen, die im vergangenen Monat eine Gesichts- oder ähnliche Hautpflegebehandlung erhalten haben, was die Beurteilung der Ergebnisse beeinflussen könnte;
  - x) Patienten, die gegenwärtig oder im vergangenen Jahr an einem Blutungssyndrom leiden bzw. litten oder Isotretinoin, Alpha-Hydroxylsäure (AHA), Rhododendronsäure oder Salicylsäure (BHA) oral oder extern verabreicht bekommen;
  - xi) Patienten, die in den vorangehenden 7 Tagen Beruhigungsmittel, narkotische und/oder lokale Schmerzmittel eingenommen haben oder noch einnehmen;
  - xii) Patienten, die in den vorangehenden 7 Tagen Aspirin, Isotretinoin, Immunsuppressiva und/oder andere Medikamente eingenommen haben oder noch einnehmen;
  - xiii) Personen mit epileptischen Anfällen in ihrer Vorgeschichte sowie
  - xiv) Alkoholiker, Psychopathen und Drogenabhängige.
- Die Anwendung des Geräts an folgenden Stellen ist strengstens untersagt:
  - i) rund um das Herz, das Gesicht und die Halslymphe, den Adamsapfel, den Mund und die Lippen, die Schleimhäute, die Augäpfel und die oberen Augenlider, das Schambein, den Anus u. Ä.;
  - ii) auf ungewöhnlichen Hauterscheinungen im Gesicht, wie Ausschlag, Entzündungen, Ekzema, Rötungen, Juckreiz, Akne, Knoten, Eiterungen usw.;

- iii) auf Schnitten, Brandwunden, Schürfwunden, Blasen, Bruchverletzungen, Geschwüren und anderen Verletzungen im Gesicht;
- iv) auf Haut mit Melanose, erhabenen Muttermalen, virusbedingten Warzen oder pathologischer Pigmentierung im gewünschten Schönheitspflegebereich;
- v) auf Stellen, an denen gegenwärtig oder in den vergangenen 3 Monaten eine Radiofrequenztherapie, ein chirurgischer Eingriff, ein chemisches Tiefenpeeling oder eine Laser-Hautverjüngung durchgeführt wird bzw. wurde;
- vi) auf blutenden, geschwollenen oder verschorften Stellen nach kosmetischen Eingriffen und Hautbereichen, die noch nicht vollständig verheilt sind sowie
- vii) Stellen, an denen kürzlich Haare entfernt oder wegrasiert wurden.
- viii) im Augenhöhlenbereich bei starker Fehlsichtigkeit (über  $-6$  dpt).

## Verwendungszweck und Anwendungsbereich

- 1) Verwendungszweck: Dieses Produkt soll die Gesichtshaut straffen und Falten im Gesicht reduzieren.
- 2) Vorgesehene Anwendung: Schönheitssalons, Kliniken, medizinische Einrichtungen und zu Hause.
- 3) Zielgruppen: Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren.
- 4) Anwendungsbereich: Gesichtshaut.

## Funktionsprinzipien

HF: Bei HF (Hochfrequenz) wird die thermische Wirkung von Strom auf das menschliche Gewebe genutzt, um die Gesichtshaut zu straffen und Falten zu reduzieren.

Mikrostrom: Bei Mikrostrom werden Nerven oder Muskeln mit niederfrequenten Stromimpulsen stimuliert, um Kontraktionen zu erzeugen, die die erwartete Bewegung bewirken und die Muskelspannung erhöhen.


Eis: Kalte Kompressen verlangsamen die Reizleitung der Nerven nicht nur, sondern reduzieren auch die Erregung der motorischen Endplatte. Dadurch wird die Schmerzschwelle erhöht und der Schmerz gelindert. Dieser Prozess kann auch die Gefäßdurchlässigkeit vermindern und damit örtlich begrenzte Aufstauungen verringern. Schweißabsonderung und Schwellung nehmen infolgedessen ab.

Lichttherapie: Durch die Umwandlung von Strom in kontrollierte Lichtenergie bestimmter Wellenlängen für Schönheitszwecke durch eine Lichtquelle kann die Lichttherapie die Zellalterung verlangsamen, den Zellstoffwechsel und die Hautelastizität erhöhen und die Haut geschmeidig glätten, indem photothermische, photochemische und/oder biologisch stimulierende Einflüsse des Lichts auf das menschliche Gewebe angewendet werden.

# Geräteaufbau

Das Produkt besteht aus einem Hauptgerät und einem Netzteil.

1) Der Bauplan des Modells sieht wie folgt aus:

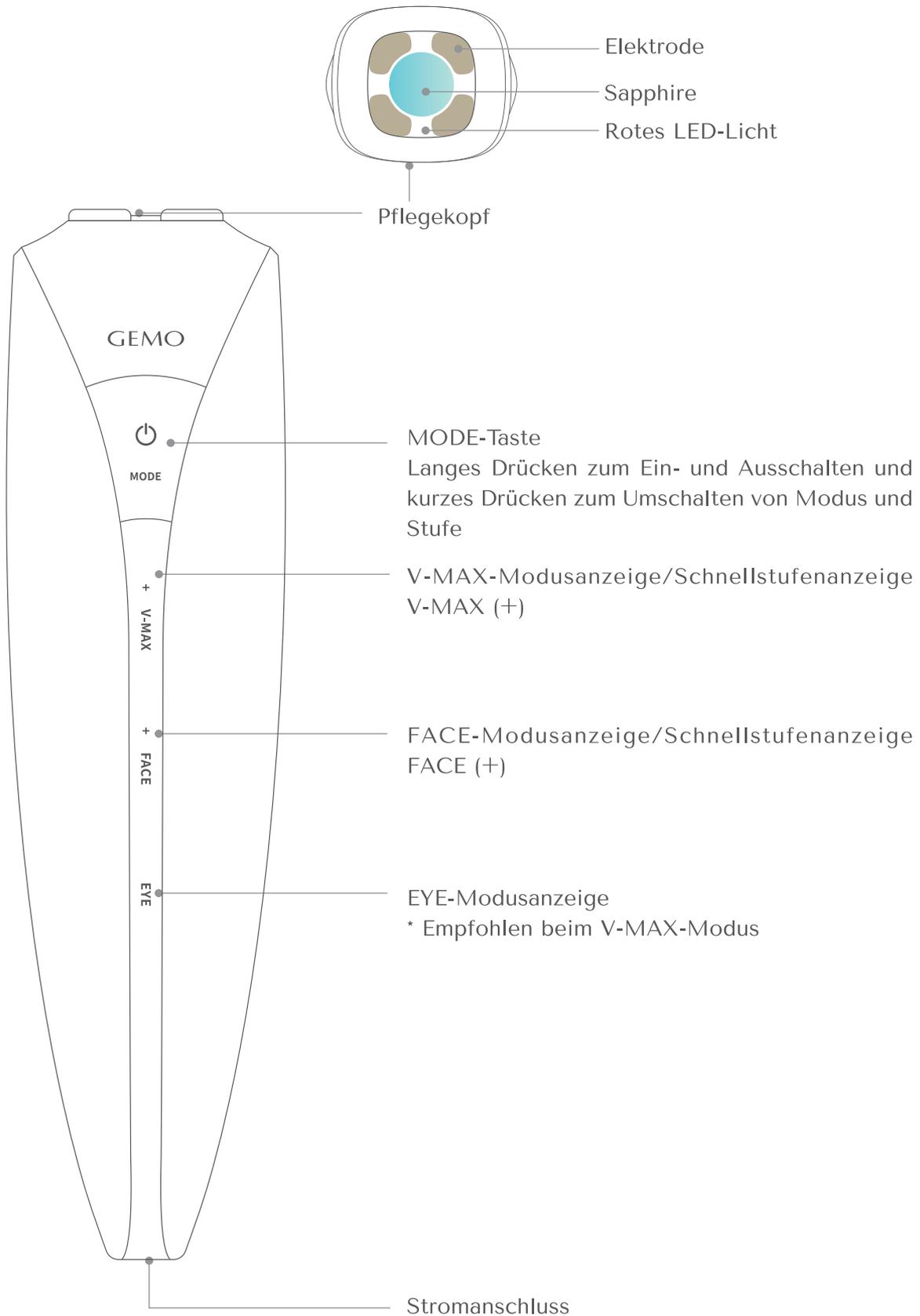

## Wichtigste Leistungsparameter

### Normale Anwendungsbedingungen

Umgebungstemperatur	5°C~40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	≤80%RH
Atmosphärendruck	80KPa~106KPa
Netzadapter-Eingang	AC100-240V~,50-60Hz, 0.6A
Netzadapter-Ausgang	12.0V $\overline{=}$ 2A, 24.0W
Produktverwendungszeitraum	5 Jahre
Versionsnummer der Software	V1.0

**⚠** Hinweis: Wenn das Gerät längere Zeit in einer Umgebung mit einer Temperatur von –20 °C oder 40 °C aufbewahrt wurde, lagern Sie vor der Verwendung 2 Stunden lang unter 20 °C.

## Wichtigste Leistungsparameter


### Funktionelle Beschreibung

Modell		G10
Funktion		
Funktions- kombination	V-MAX-Modus	HF + Mikrostrom + Rotes LED-Licht + Eiskompresse (umschaltbar zwischen V-MAX und V-MAX+)
	FACE-Modus	HF + Mikrostrom + Rotes LED-Licht + Eiskompresse (umschaltbar zwischen FACE und FACE+)
	EYE-Modus	HF + Mikrostrom + Eiskompresse (eine Stufe)
Werkstoffe (Teile, die mit dem menschlichen Körper in Berührung kommen)		Schönheitselektrode: Edelstahl 316L, Goldfarben Gehäuse: PC+ABS

# Anweisungen für Installation und Anwendung



## Vor der Anwendung

1. Auspacken und prüfen: Nehmen Sie das Hauptgerät und das Zubehör aus dem Umkarton, überprüfen Sie das Zubehör anhand der Packliste und bewahren Sie die entsprechenden Verpackungsmaterialien für den späteren Transport, die Lagerung und die Überprüfung auf.
2. Überprüfen Sie bitte, ob das Hauptgerät und das Zubehör, einschließlich des Netzkabels und des Adapters, intakt sind und keine mechanischen Schäden aufweisen. Bei Anzeichen einer Funktionsstörung darf das Gerät nicht verwendet werden. In diesem Fall muss umgehend der Händler oder der Kundendienst informiert werden.
3. Schließen Sie das Netzteil an den Stromanschluss an und drücken Sie anschließend 1 bis 2 Sekunden lang die MODE-Taste, um das Gerät einzuschalten. Prüfen Sie dabei, ob das Gerät normal hochfährt (alle Anzeigen leuchten weiß und blinken langsam, bis sie nach dem Einschalten in den Standby-Modus wechseln).

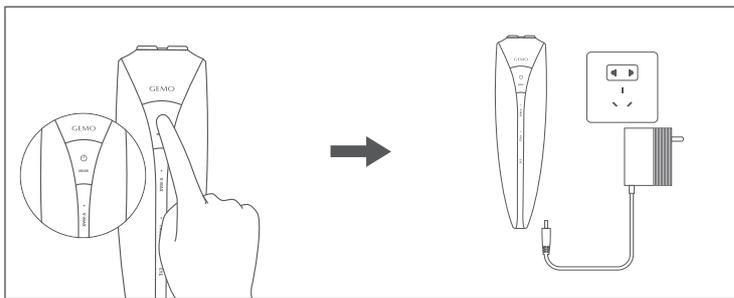

4. Vorbereitungen:
  - Entfernen Sie ggf. Kontaktlinsen sowie Metallschmuck von Ohren, Gesicht und Hals.
  - Reinigen Sie Ihr Gesicht von Kosmetika, Schmutz und Hautpartikeln.
  - Für männliche Anwender: Bitte führen Sie vor der Anwendung eine Vollrasur im Gesicht durch.
5. Hautverträglichkeitstest:
  - Damit keine unerwünschte Hautreaktion auftritt, führen Sie vor der Anwendung des Produkts einen Hautverträglichkeitstest durch.
  - Reinigen Sie die Innenseite Ihres Arms und tragen Sie eine angemessene Menge Gel bzw. Essenz direkt darauf auf. Schalten Sie dann das Gerät ein und verwenden Sie es 3 Minuten lang im V-MAX-Modus, massieren Sie den Überschuss an Gel oder Essenz ein, bis alles absorbiert ist, und beobachten Sie, ob innerhalb von 5 Minuten Hautirritationen auftreten.
  - Der Verbraucher kann das Produkt weiterhin verwenden, wenn während oder nach dem Test keine Hautirritationen wie Ausschlag, ungewöhnliches Brennen, Juckreiz oder Rötung auftreten.
  - Bei Unwohlsein oder unerwünschten Reaktionen muss der Test sofort abgebrochen werden.

## Anwendungsverfahren

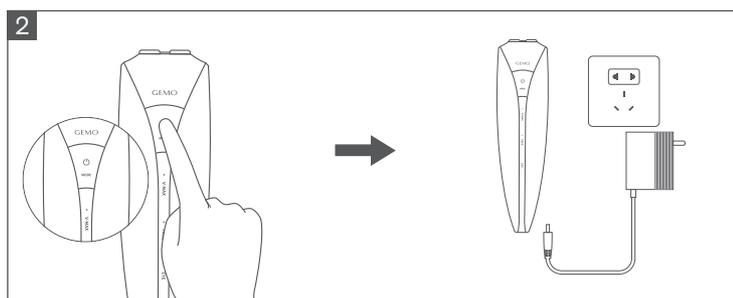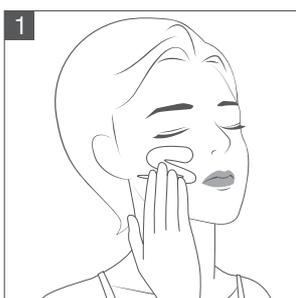


### 1. Gel oder Essenz auftragen

Tragen Sie eine ausreichende Menge Gel oder Essenz auf die zu behandelnde Stelle auf. Ein Auftrag in mehreren Etappen wird empfohlen, damit das Gel oder die Essenz nicht austrocknet und die Anwendung beeinträchtigt. Bei trockener Haut oder erhöhtem Bewegungswiderstand des Geräts kann man aber auch während der Anwendung eine angemessene Menge Gel oder Essenz hinzugeben, damit die Elektroden spitze reibungslos über die Haut gleitet.

### 2. Gerät einschalten


Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und drücken Sie die MODE-Taste 1 bis 2 Sekunden lang, um es einzuschalten (zu diesem Zeitpunkt leuchten alle Anzeigen weiß und blinken langsam, bis der Standby-Modus eintritt).

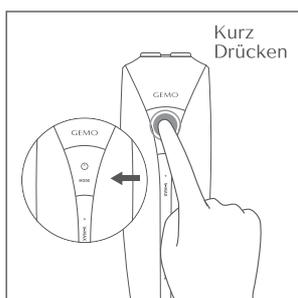

### 3. Modus und Stufe auswählen

Drücken Sie kurz auf die MODE-Taste, woraufhin das Gerät in den gebrauchsfertigen [Betriebszustand] wechselt. Sie können es anwenden, wenn die Anzeige für den ausgewählten Modus und die Stufenanzeige separat aufleuchten. Jedes Mal, wenn Sie die MODE-Taste kurz drücken, werden der Modus und die Stufe zyklisch wie folgt gewechselt:


V-MAX→V-MAX (+)→FACE→FACE (+)→EYE→V-MAX

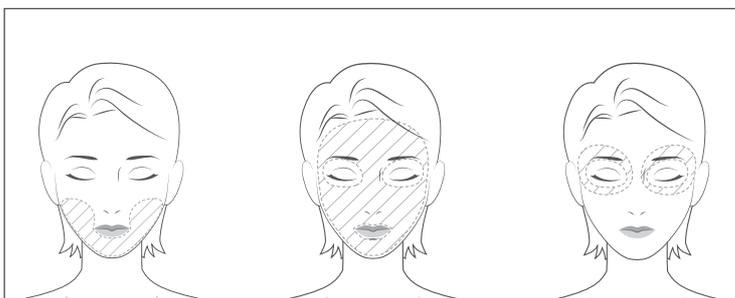


### 4. Anwendung auf verschiedenen Bereichen

Das Gesicht kann in jedem Modus in 2 bis 3 Behandlungsbereiche aufgeteilt werden. Wenn die Behandlung eines bestimmten Bereichs abgeschlossen ist, gibt das Gerät zwei Pieptöne ab und legt eine Pause ein. Dann kann Essenz oder Gel erneut aufgetragen werden. Drücken Sie anschließend kurz die MODE-Taste und fahren Sie in diesem Modus mit dem nächsten Bereich bis zum Abschluss der Behandlung fort.

## V-MAX-Modus

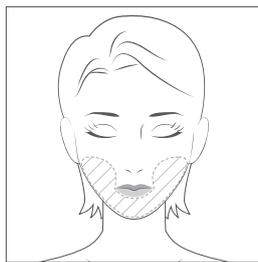


- \*Funktionskombination: HF + Mikrostrom + Rotes LED-Licht + Eiskompresse
- \*Anwendungsbereiche: Unterhalb der Wangenknochen und oberhalb des Halses
- \*Behandlungsdauer: 6 Minuten (3 Minuten für die linke bzw. rechte Unterkieferpartie)
- \*Stufen: Dieser Modus unterscheidet 2 Stufen. Das „+“-Zeichen leuchtet auf, um die 2. Stufe anzuzeigen. Der Benutzer muss die entsprechende Stufe auswählen.

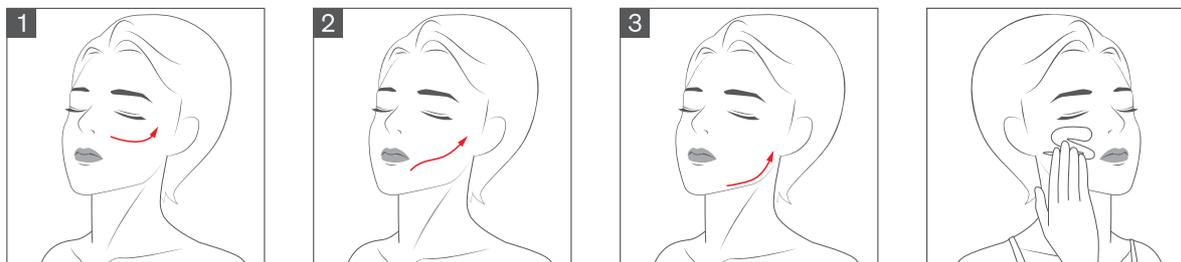

### Linke Unterkieferpartie

- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 jeweils 10 bis 15 Mal, bis das Gerät nach 3 Minuten zweimal piept und die V-MAX-Einzelmodusanzeige blinkt. Dies zeigt an, dass die Behandlung der Unterkieferpartie der einen Seite beendet ist und das Gerät nun pausiert. Dann können Sie Gel oder Essenz auf der anderen Seite auftragen.

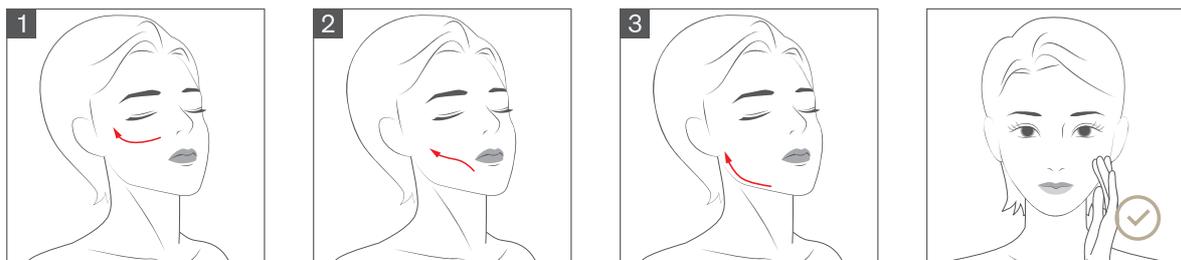

### Rechte Unterkieferpartie

- Nach dem Auftrag drücken Sie kurz die MODE-Taste, um mit der anderen Seite der Unterkieferpartie fortzufahren, und zwar nach dem gleichen Verfahren wie zuvor. Anschließend, 3 Minuten später, piept das Gerät 4 Mal (die ersten 3 Pieptöne sind kurz und der letzte lang). Daraufhin leuchten und blinken alle Modusanzeigen und signalisieren so, dass die gesamte Behandlung im V-MAX Modus durchgeführt ist.

## FACE-Modus




\*Funktionskombination: HF + Mikrostrom + Rotes LED-Licht + Eiskompressse

\*Funktionskombination: Das gesamte Gesicht mit Ausnahme von Augenhöhlen, Mund und Lippen.

\*Funktionskombination: 10 Minuten (2 Minuten für die Stirn und je 4 Minuten für die linke bzw. rechte Gesichtshälfte).

\*Funktionskombination: Dieser Modus umfasst 2 Stufen. Das „+“-Zeichen leuchtet auf, um die 2. Stufe anzuzeigen. Bitte wählen Sie die passende Stufe aus.

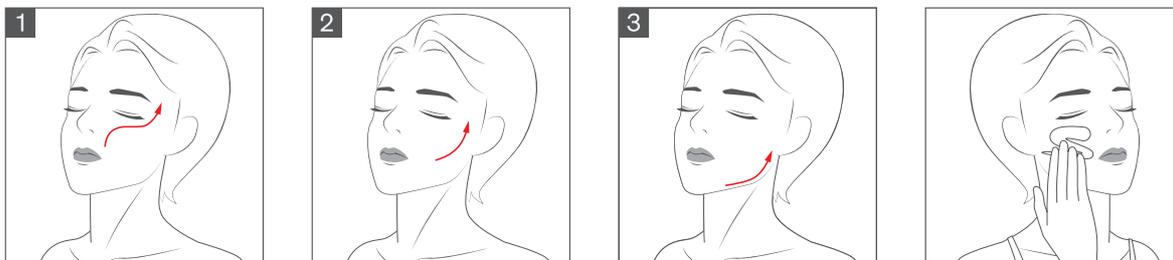




### Linke Gesichtshälfte

- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 jeweils 10 bis 15 Mal, bis das Gerät nach 4 Minuten zweimal piept und die FACE-Einzelmodusanzeige blinkt. Diese zeigt an, dass die Behandlung der Gesichtshälfte abgeschlossen ist und das Gerät pausiert. Dann können Sie Gel oder Essenz auf der anderen Seite auftragen.



### Rechte Gesichtshälfte


- Nach dem Auftrag drücken Sie kurz die MODE-Taste, um mit der anderen Gesichtshälfte fortzufahren, und zwar nach den gleichen Verfahren wie zuvor. Nach 4 Minuten gibt das Gerät zwei Pieptöne ab und die FACE-Einzelmodusanzeige blinkt. Damit wird bestätigt, dass die Behandlung der Wangen abgeschlossen ist und das Gerät nun pausiert. Dann können Sie Gel oder Essenz auf Ihre Stirn auftragen.

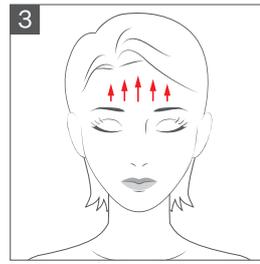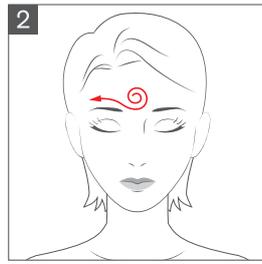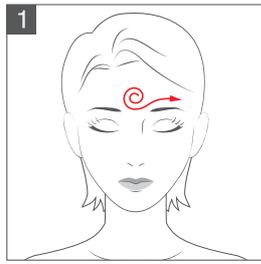

### Stirn

- Drücken Sie anschließend kurz die MODE-Taste, um mit der Stirn fortzufahren. Bitte wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 jeweils 10 bis 15 Mal, bis das Gerät nach 2 Minuten viermal piept (die ersten drei Pieptöne sind kurz und der letzte lang) und alle Modusanzeigen aufleuchten und blinken, um zu bestätigen, dass die Behandlung des gesamten Gesichts im FACE-Modus abgeschlossen ist.

## EYE-Modus

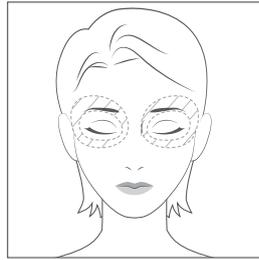


\*Funktionskombination: HF + Mikrostrom + Eiskompresse

\*Funktionskombination: Augenhöhlenbereich, einschließlich des Raums zwischen den Augenbrauen und oberhalb des Augenbrauenkamms, der äußeren Augenwinkel und des Bereichs unterhalb des Auges.

\*Funktionskombination: 4 Minuten (2 Minuten für den rechten bzw. linken Augenhöhlenbereich)

\*Funktionskombination: Dieser Modus verfügt über 1 Stufe und sollte zusammen mit dem V-MAX-Modus verwendet werden.

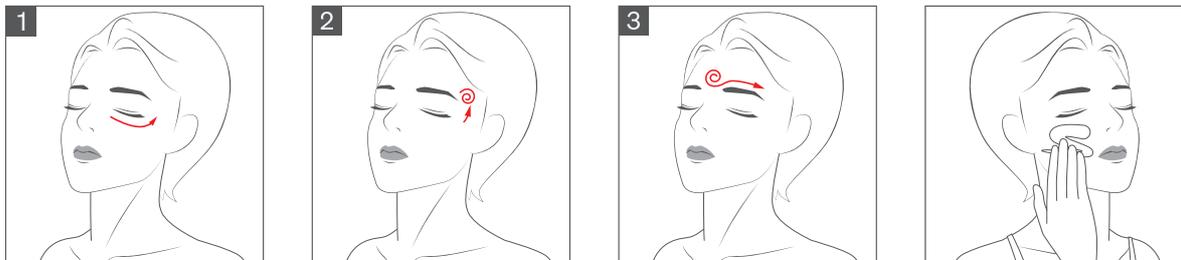


### Linkes Auge

- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 jeweils 10 bis 15 Mal, bis das Gerät nach 2 Minuten zweimal piept und die EYE-Einzelmodusanzeige blinkt. Dies zeigt an, dass die Augenhöhlenbehandlung auf einer Seite abgeschlossen ist. Dann können Sie Gel oder Essenz auf der anderen Seite auftragen.



### Rechtes Auge

- Nach dem Auftrag drücken Sie kurz die MODE-Taste, um mit der anderen Augenhöhle fortzufahren, und zwar nach den gleichen Verfahren wie zuvor. Anschließend, 2 Minuten später, piept das Gerät 4 Mal (die ersten 3 Pieptöne sind kurz und der letzte lang). Daraufhin leuchten und blinken alle Modusanzeigen und zeigen damit an, dass die gesamte Behandlung im EYE-Modus abgeschlossen ist.

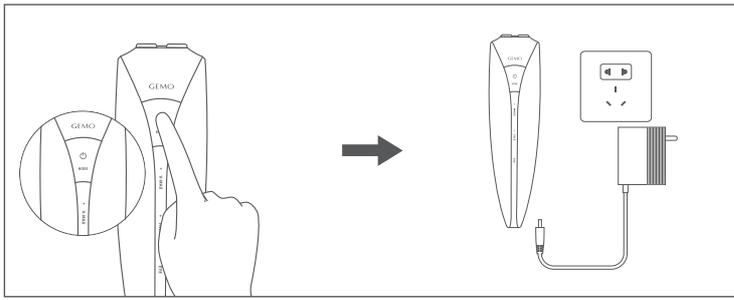

#### 4. Abschluss der Behandlung

Wenn einer der Modi vollständig durchlaufen ist.


(1) Wenn Sie andere Modi anwenden möchten, drücken Sie kurz die MODE-Taste, um den Modus zu wechseln, und wiederholen Sie anschließend die oben genannten Schritte.

(2) Oder drücken Sie lange auf die MODE-Taste, um das Gerät auszuschalten, und trennen dann das Netzteil ab.

\*Während der Anwendung schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn es 3 Minuten lang im Standby-Modus verbleibt und nicht benutzt wird.

\*Das Netzkabel muss unabhängig von der manuellen oder automatischen Abschaltung rechtzeitig aus der Steckdose gezogen werden wegen Brandgefahr.


### Nach der Anwendung

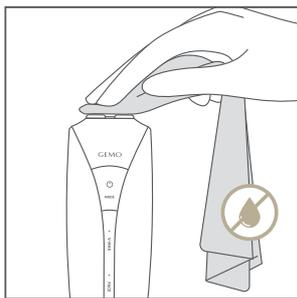

#### 1. Wartung des Geräts

Trennen Sie den Netzanschluss und reinigen Sie den Pflegekopf idealerweise mit einem weichen und leicht angefeuchteten (nicht zu nassen) Tuch.

Hinweis: Spülen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab und wischen Sie es nicht mit ätzenden Flüssigkeiten wie alkalischen Reinigungsmitteln und Nagellackentferner ab.

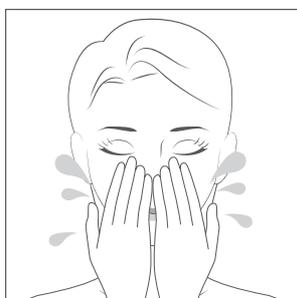

#### 2. Reinigung des Gesichts:

Spülen Sie sich das Gesicht mit klarem Wasser ab, bis das Gel bzw. die Essenz komplett entfernt ist, und pflegen Sie Ihre Haut anschließend je nach persönlichem Bedarf.

## Betriebshäufigkeit

- V-MAX-Modus: 6 Minuten pro Anwendung (3 Minuten für die linke bzw. rechte Unterkieferpartie).
- FACE-Modus: 10 Minuten pro Anwendung (4 Minuten für die linke bzw. rechte Gesichtshälfte und 2 Minuten für die Stirn).
- EYE-Modus: 4 Minuten pro Anwendung (jeweils 2 Minuten für die linke und die rechte Augenhöhle).

Tag 1	Tag 2	Tag 3	Tag 4	Tag 5	Tag 6	Tag 7
FACE	V-MAX+EYE	FACE	V-MAX+EYE	FACE	V-MAX+EYE	Rest

\*Hinweis: Anwendung einmal täglich im Abstand von mindestens 12 Stunden. Wenn Sie den V-MAX + EYE-Modus zusammen anwenden, betreiben Sie bitte zuerst den V-MAX-Modus für 6 Minuten und danach den EYE-Modus für 4 Minuten.

## Wahl von Gel oder Essenz

Es wird empfohlen, Gele oder Essenzen zu verwenden, die im System der kosmetischen Produkte oder Medizinprodukte der Europäischen Union registriert sind.

## Verfahren zur Reinigung, Desinfektion, Wartung und Pflege

### Reinigung des Produkts

I. Bitte schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es vom Netz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen.

II. Es wird empfohlen, Gerät und Kabel mit einem weichen Tuch aus Stoff oder Papier oder mit alkoholfreien Reinigungstüchern zu reinigen.

Hinweis: Falls sich die Verschmutzungen nicht gut entfernen lassen, reinigen Sie die entsprechenden Stellen bitte mit einem sauberen Tuch oder einem Wattestäbchen, das in 75%igen medizinischen Alkohol getaucht ist. Reinigen Sie das Gerät auf keinen Fall mit Stahlwolle oder ätzenden Reinigungsmitteln.

III. Bitte reinigen Sie Gerät und Zubehör nicht unter fließendem Wasser oder in einer Spülmaschine.



### Desinfektion des Produkts

1. Wenn die Elektrodenspitze verschmutzt ist, wischen Sie sie zur Desinfektion mit einem weichen Tuch ab, das in Wasser oder etwas Alkohol (medizinischer Alkohol mit einer Konzentration von 75 %) getaucht ist.

Wartung und Pflege des Produkts

(1) Bitte sorgen Sie dafür, dass das Produkt trocken bleibt. Tauchen Sie wegen der Stromschlaggefahr das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser ein.

(2) Reinigen Sie das Gerät stets vor dem Lagern. Bewahren Sie Gerät und Zubehör nach Gebrauch immer im Umkarton auf, um mögliche Schäden oder Verluste zu vermeiden.

(3) Falls Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es bitte an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort auf, an dem keine Kollisionsgefahr mit harten Gegenständen besteht.

(4) Bitte lagern Sie Produkt und Zubehör nicht längere Zeit in einer feuchten Umgebung, da sie seiner Funktionsfähigkeit schaden kann.

## Lager- und Transportbedingungen

- Umgebungstemperatur: -20°C bis 40°C
- Relative Feuchte: 10 % RF - 93 % RF
- Atmosphärischer Druck: 70 kPa–106 kPa
- Bewahren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort ohne korrodierende Gase auf.
- Die Transportvoraussetzungen müssen den im Kaufvertrag festgelegten Bestimmungen entsprechen. Achten Sie jedoch darauf, dass das Gerät bei Transport vor Erschütterungen, Regen und Schnee sowie harten Stößen geschützt ist.

## Kalibrierung und Wartung

- Kalibrierung: Dieses Gerät wurde vor dem Verlassen des Werks strengen Kontrollverfahren unterzogen. Seine voraussichtliche Nutzungsdauer liegt bei etwa 5 Jahren. In dieser Zeit gilt die Gewährleistung nur für eine routinemäßige Wartung, Reinigung und Desinfektion gemäß dieser Anleitung. Sollten Sie einen Produktfehler feststellen, wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Hersteller.

Ein Netzteil, dessen erwartete Nutzungsdauer 5 Jahre beträgt, wird als Zubehör mit dem Produkt geliefert.

- Wartung: Das Unternehmen hat weder eine Einzelperson noch eine Einrichtung zu Wartungsarbeiten oder Änderungen zugelassen. Insbesondere die unbefugte Wartung und Veränderung des Geräts beeinträchtigt seine Sicherheit und Funktionsfähigkeit erheblich. Wenn Sie der Ansicht sind, dass es ein Problem mit dem Produkt gibt, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit unseren Kundendienstmitarbeitern oder dem Hersteller in Verbindung, damit die Angelegenheit geklärt werden kann. Sie dürfen das Produkt jedoch nicht ohne Genehmigung auseinander nehmen oder verändern.

## Problembehandlung

Häufige Probleme bei der Anwendung: Falls Sie das Problem anhand der folgenden Informationen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den zuständigen Händler.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	Das Netzteil wurde nicht richtig eingesteckt.	Bitte überprüfen Sie, ob das Netzteil korrekt an Steckdose und angeschlossen ist.
	Fehlbedienung	Drücken Sie die MODE-Taste so lange, bis alle Modusanzeigen aufleuchten und blinken.
	Fehler im Gerät oder im Netzteil	Verständigen Sie den Kundendienst unter <a href="mailto:info@gemoglobal.com">info@gemoglobal.com</a> .
Das Gerät schaltet sich nicht aus.	Fehlbedienung	Halten Sie die MODE-Taste für 1 bis 2 Sekunden gedrückt, bis alle Anzeigen erloschen sind.
Gerät funktioniert plötzlich nicht mehr	Das Netzteil wurde getrennt.	Bitte überprüfen Sie, ob das Netzteil korrekt an Steckdose und angeschlossen ist.
	Kein Betrieb für 3 Minuten	Prüfen Sie, ob alle Anzeigen erloschen sind. Falls ja, starten Sie das Gerät neu.
	Das Gerät geht in den [Standby-Modus].	Vergewissern Sie sich, ob alle Anzeigen gemeinsam langsam blinken. Falls ja, drücken Sie kurz die MODE-Taste, um einen Modus auszuwählen, und vergewissern Sie sich, dass nur die Anzeige des ausgewählten Modus konstant leuchtet, bevor Sie ihn verwenden.
	Das Gerät geht in den [Bereichswechsel-Modus].	Prüfen Sie, ob nur die Anzeige des ausgewählten Modus langsam blinkt. Falls ja, drücken Sie die MODE-Taste und beginnen Sie mit der Anwendung.
	Fehler im Gerät oder im Netzteil	Verständigen Sie den Kundendienst unter <a href="mailto:info@gemoglobal.com">info@gemoglobal.com</a> .
Erwärmung des Hauptgeräts	Lange Verwendung des Geräts	Schalten Sie das Gerät aus, stecken Sie das Netzkabel aus und lassen Sie das Gerät für mehr als 1 Stunde ruhen, bevor Sie es wieder verwenden.
Akutes Stromschlagempfinden	Das Gerät wird nicht fest genug auf die Haut gedrückt.	Drücken Sie das Gerät fest auf die Haut und bewegen Sie es mit konstanter Geschwindigkeit.
	Die Stufe ist zu intensiv.	Wählen Sie eine Stufe niedriger und steigern Sie langsam die Intensität.
Schwach elektrisches Prickeln	Die Haut ist sehr tolerant.	Normalerweise variiert die Wahrnehmung von Strom durch die Gesichtsmuskeln von Mensch zu Mensch. Sie sollte auf der Grundlage der Überprüfung gemäß den folgenden Methoden erhöht werden. Andernfalls wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter <a href="mailto:info@gemoglobal.com">info@gemoglobal.com</a> .
	Die Stufe ist zu niedrig.	Bitte wählen Sie die zweite Stufe.
	Das Gerät gleitet zu schnell.	Achten Sie darauf, das Gerät mit einer konstanten, etwas niedrigeren Geschwindigkeit zu bewegen.
	Das Gerät pausiert.	Möglicherweise wurde der Schutzmechanismus ausgelöst. Bewegen Sie das Gerät mit einer konstanten Geschwindigkeit.

## Wichtigste Sicherheitsfunktionen

Klassifizierung nach Art des Schutzes gegen Stromschlag	Schutzklasse II
Klassifizierung nach Grad des Schutzes gegen Stromschlag	Typ BF
Schutzart	IP22
Das Gerät ist	für Dauerbetrieb geeignet
Netzteileingang	AC100-240V~,50-60Hz, 0.6A
Netzteil Ausgang	12.0V= 2A, 24.0W
Das Produkt	enthält keine Signaleingangs-/ausgangsteile
Das Gerät ist	nicht dauerhaft montiert

## Zubehörliste

Lfd. Nr.	Name der Komponente	Anzahl
1	Kosmetikgerät	1
2	Netzteil	1
3	Gebrauchsanweisung	1

## Beschreibung der Grafiken und Symbole

Symbole	Erklärung	Symbole	Erklärung
	Anwendungskomponente Typ BF		Gebrauchsanweisung
	Warnung		Von Wasser fernhalten
	Entsorgungshinweise für elektronische und elektrische Produkte. Die Produkte sollten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.		Zerbrechlich, mit Sorgfalt behandeln
	Nicht dem Sonnenlicht aussetzen		Umweltfreundliche Nutzungsdauer von elektronischen Produkten (10 Jahre)
	Diese Seite nach oben		Obergrenze beim Stapeln
	Nur für den Gebrauch in Innenräumen		AC
	Bitte verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer Dusche, Badewanne oder einem mit Wasser gefüllten Behälter.		
<b>IP22</b>	Gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern: $\geq 12,5$ mm Durchmesser. Gegen Eindringen von Wasser mit schädlichen Auswirkungen: Tropfwasser (15 °C)		

## Erklärung zur Entsorgung des Geräts

Aus Umweltschutzgründen ist der Verbraucher dafür verantwortlich, das Produkt oder Teile davon nach der Außerbetriebnahme vom Hausmüll zu trennen und bei zugelassenen Recyclingstellen abzugeben, wo diese Altgeräte vorschriftsgemäß klassifiziert, demontiert und recycelt werden.

## Gewährleistung und Garantie

Für dieses Gerät gilt ab dem Kaufdatum eine 24-monatige Gewährleistung. Wir bieten Ihnen kostenlose Wartung, Ersatzteilservice und andere Dienstleistungen bei Funktionsstörungen, die durch den normalen Gebrauch entstehen. Schäden, die auf einen der folgenden Fälle während der Gewährleistungsfrist zurückzuführen sind, werden ausdrücklich nicht durch den kostenlosen Wartungsservice abgedeckt:

- Betrieb oder Wartung, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen erfolgen
- Fehler, die zur Beschädigung des Geräts führen
- unzumutbare Betriebsbedingungen wie Korrosion oder hohe Temperaturen
- abnormale Krafteinwirkung wie Quetschung, Sturz und Stoß
- höhere Gewalt wie Blitzschlag, Brand und Überschwemmung
- Zubehör oder Erweiterungselemente, die nicht vom Hersteller geliefert werden
- Verwendung nach Ablauf der Gewährleistungsfrist

## Elektromagnetische Verträglichkeit

### VORSICHT:

- Das Produkt/Gerät sollte in einer geeigneten elektromagnetischen Umgebung verwendet werden, da es sonst möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Sein regulärer Betrieb kann durch tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte beeinträchtigt werden. Betreiben Sie das Kosmetikgerät deshalb bitte nur in der empfohlenen elektromagnetischen Umgebung.
- Zubehör und Kabel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind, können zu höheren Geräteemissionen oder geringerer Störfestigkeit führen.
- Das Produkt/Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe zu anderen Geräten verwendet oder darauf/darunter gestapelt werden. Falls dies ausnahmsweise notwendig ist, muss das Produkt kontrolliert werden, damit es auch unter solchen Bedingungen weiterhin ordnungsgemäß funktioniert.

GEMO